

Vybavení veterinární ordinace

produktový katalog



Zajišťujeme kompletní vybavení ordinací vysoce kvalitními přístroji, nábytkem a doplňky.
Zpracujeme Vaše specifické požadavky pro pohodlí a spokojenost Vaši i Vašich klientů.

Více než jen prodej ...

Společnost DN FORMED Brno s.r.o působí na českém trhu od roku 1992 v oblasti distribuce zařízení a servisních služeb pro privátní zdravotnický sektor, nemocnice, kliniky, laboratoře, rehabilitace, ústavy sociální péče, lázně a wellness provozy.

Specializujeme se na vybavení operačních sálů, ARO, JIP a kompletace technologických celků.

Zaměřujeme se na výrobky vysoké kvality s dlouhou životností.

Dlouhodobě zastupujeme několik renomovaných zahraničních firem z různých lékařských oborů: MEDELA, DERUNGSS, NOUVAG – Švýcarsko, SCHMITZ, DUFNER – Německo, EMED, METRUM CRYOFLEX – Polsko, ENVAIR - Anglie.

Zajišťujeme montáž a servis dodávaného zboží, spolupracujeme s inženýrskou kanceláří se specializací na lékařskou techniku pro dodávky komplexních technologických celků.

Realizovali jsme mnoho dodávek pro stacionární a mobilní zdravotnická pracoviště.

Ve spolupráci s bankovními institucemi zajišťujeme financování technologických celků včetně finančního leasingu.

Využíváme vlastní kalibrační laboratoř pro kalibrace pipet a validace laboratorních zařízení.

V oblasti metrologie zajišťujeme poradenství pro zajištění metodologických postupů v nemocnicích.

V rámci mezinárodních výstav zdravotnické techniky jsme obdrželi řadu významných ocenění pro výrobky firem, které na českém trhu zastupujeme.

Společnost DN FORMED Brno s.r.o. je certifikována TUV dle systému ISO ČSN EN ISO 9001:2009.

Obsah

Chirurgické odsávačky Medela.....	5
Svítidla Derungs.....	6
Elektroautery Emed.....	7
Lokální kryoterapie.....	8

Odsávací systémy

Odsávačky švýcarského výrobce Medela AG jsou charakteristické svojí vysokou výkonností, inteligentním bezpečnostním opatřením a snadnou obsluhou. Mimořádně spolehlivý chod díky pístovému systému a nenáročný provoz odsávaček garantuje splnění nejvyšších nároků kladených při odsávání. S komplexní řadou příslušenství nabízí Medela moderní účinná řešení.

Široká řada typů odsávaček nabízí možnost jejich využití v privátní lékařské praxi, domácí i nemocniční péči, LDN nebo sanitních vozech.

BASIC 35

Účinná univerzální volba

Technologie nejvyšší úrovně

- pístový systém pro rychlé vytvoření vakua
- efektivní sací výkon: min. 30 l/min
- min. průtok 25 l/min., max. průtok 35 l/min.
- podtlak: - 90 kPa, tolerance +/- 15%
- membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
- záruka na agregát přístroje 5 let

Flexibilita

- přenosná nebo pojízdná verze
- příslušenství pro jednorázové nebo opakované použití
- vhodná i pro vakuumextrakce

Výhody

- velmi tichý a spolehlivý provoz
- bezúdržbový systém
- dlouhá životnost

Další typy odsávaček

Podrobná technická data k jednotlivým typům odsávaček sdělíme na vyžádání.



DOMINANT FLEX
- pro operační sály



VARIO 18
- pro ambulance a lůžka



CLARIO
- pro domácí péči

Elektrochirurgie bez hranic

Univerzální elektrochirurgický generátor EMED ES 120

ES120 nabízí samostatné ovládání monopolárního řezu a koagulace a bipolární koagulace. Generátor je možné doplnit o multifunkční noční spínač.

Přístroj pracuje v následujících módech:

- čistý řez
- řez s hemostází
- povrchová koagulace
- hloubková koagulace
- bipolární koagulace

Díky intuitivnímu ovládání a jednoduchému použití je generátor ES120 ideální pro ambulantní použití v gynekologii, dermatologii a plastické chirurgii, stejně jako při drobných chirurgických zákrocích.




Výhody

- samostatné ovládání monopolárního a bipolárního výstupu
- samostatný konektor pro připojení monopolárního a bipolárního příslušenství.
- multifunkční noční spínač

Volitelné příslušenství

Součástí nabídky je široká řada volitelného příslušenství k nabízeným elektrokauterům EMED:

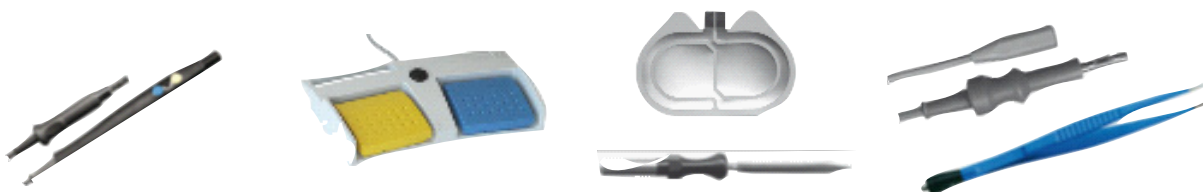

EMED představuje celou řadu výkonných elektrochirurgických generátorů



EMED ES 300



EMED ES 350



EMED ES 350
(argon + thermostapler)



EMED ARTRO



EMED ES SPECTRUM



EMED ATOM

Švýcarská kvalita ověřená 65 letou tradicí

Typologie

- operační / zákrová - stropní, nástěnná, pojízdná
- zákrová / vyšetřovací - stropní, nástěnná, pojízdná nebo s volitelným uchycením na eurolištu, stůl

Základní standardy výrobce

- špičková švýcarská kvalita
- vysoká světelná intenzita technologie LED
- diamantová optika pro optimální míchání barev světla (u vybraných typů svítidel)
- moderní design
- všechny klouby svítidel jsou fixovány speciálním balančním systémem
- flexibilní ramena vyráběná speciální technologií zaručující jejich dlouhou životnost
- odnímatelný držák sterilizovatelný na 120 °C (u vybraných typů svítidel)
- variantní řešení
- ekonomický a praktický provoz
- nejaktuálnější lékařské normy
- vysoké bezpečnostní předpisy
- záruka 2 roky

Kompletní katalog svítidel a podrobné technické nákresy k jednotlivým typům svítidel zašleme na vyžádání.



Triango LED - 60.000 lx / 1m, 4500 K



Iris LED - 50.000 lx / 1m, 4300 K



Visiano 20 LED - 60.000 lx / 0,5m
3500 K / 4500 K



Visiano 10 LED - 50.000 lx / 0,5m, 4400 K



Halux LED - 40.000 lx / 0,5m, 4400 K nebo
4400 K / 3800 K / 3300 K



HX LED - 15.000 lx / 0,5m, 4000 K

CRYO - T duo

Metrum CryoFlex

Přístroj pro lokální kryoterapii

Cryo-T duo je přístroj pro lokální kryoterapii. Terapie je aplikována pomocí plynu – oxidu uhličitého CO₂. Tento plyn má na lidský organismus dvojitý účinek. Funguje jako chladicí prostředek (1. fáze procedury) a jako biochemické činidlo způsobuje rozpínání žil (2. fáze procedury).

APLIKACE:

- při revmatických a degenerativních poruchách kloubů
- po poranění, pohmoždění v průběhu rekonvalescence
- jako rehabilitace po operaci
- při onemocnění kloubů, svalů, šlach, podvrtnutí
- při léčbě popálenin
- při bolesti v kříži a při migréně
- u nadváhy a obezity (zvyšuje buněčný metabolismus)
- v kosmetice – léčba celulitidy

PŘÍSLUŠENSTVÍ:


Tři vyměnitelné vstřikovací trysky s elektronickým indikátorem pracovní teploty umožňují vhodně zchladit zvolené oblasti těla a efektivně využít CO₂. Největší tryska se používá na velké oblasti jako např. boky, hýždě, záda. Střední tryska je vhodná na velké klouby (loket, koleno) a končetiny. Použití nejmenší trysky je efektivní u drobných loubů (interfalangeální klouby) a pro stimulaci MERIDIANS (tzv. kryopunktura).



DIGITÁLNÍ DISPLEJ

- ukazatel teploty
- volba trysky
- ukazatel stavu plynu
- ukazatel tlaku plynu
- ukazatel doby terapie



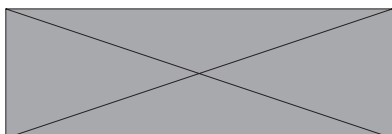

DN FORMED Brno s.r.o. • Hudcova 76a, 612 48 Brno
tel.: +420 532 198 888 • fax: +420 532 198 889
www.dnformed.cz • dnformed@dnformed.cz